

## ПАМЯТКА

крепления поплавков в модификациях «П» - плавающие и «ВП» - вертолетные плавающие

Крепление поплавков осуществляется ...

Перед помещением эвакуируемого в носилки или извлечения из них, замки пряжек верхних крепежных ремней расстегиваются и разводятся в стороны. Притапливая носилки собственным весом их заводят под эвакуируемого находящегося на плаву...

крепления «Паука» в модификациях «В» - вертолетные и «ВП» - вертолетные плавающие

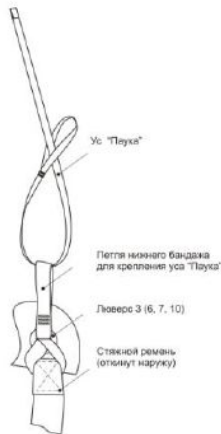
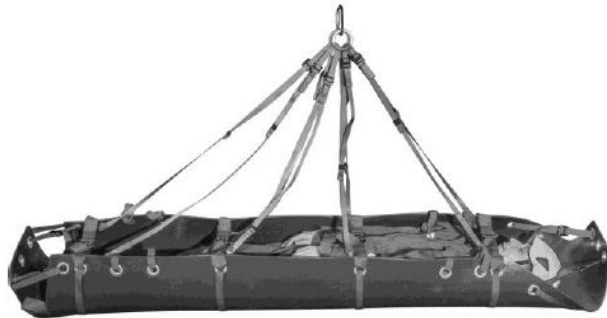


Рис.2

Крепление «Паука» осуществляется к петлям нижних бандажей, предварительно помещенным с внешней, от эвакуируемого, стороны полотна и продетым в люверсы крепления стяжных ремней. Петли образуют по четыре точки крепления на каждой стороне носилок. Крепление усов каждой половины «Паука» осуществляется к своей стороне носилок. Сначала необходимо поочередно отсоединить нижнюю часть каждого уса от самоконтращейся пряжки, произвести соединение в полусхватывающий узел (Рис.2) и восстановить первоначальное соединение в пряжке. Окончательная регулировка длины усов «Паука» осуществляется по месту, после помещения эвакуируемого в носилки, для придания ему горизонтального положения или желаемого угла наклона.

Перед помещением эвакуируемого в носилки или извлечения из них, половинки «Паука» разводятся в стороны и не препятствуют действию.

## ПАСПОРТ

### Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС



#### 1. Общие сведения о носилках

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС предназначены для перемещения больных или пострадавших ручным способом в узких и труднодоступных местах. Модификация «П» (плавающие) позволяет принять для транспортировки эвакуируемого с водной поверхности на борт плавательного средства. Модификация «В» (вертолетные) позволяет подъем с земли на борт вертолета лебедкой.

Носилки компактны в собранном виде, что облегчает доставку к месту назначения. Эвакуацию волоком и крепление к лебедке может осуществлять 1 человек.

Наличие четырех фиксирующих ремней позволяет надежно закрепить транспортируемого при его эвакуации и перемещении в труднодоступных местах под любыми, допустимыми для его состояния, углами.

#### 2. Модификация изделия

№	Литера / Наименование	Толщина пластикового полотна, [мм]	Габариты в транспорти-ровочном чехле (в сложенном виде), мм	Масса, кг
1	«Т» / тактические	4	900*250*250	5.7
2	«К» / классические	2	900*250*250	5.7
3	«П» / плавающие	3	900*400*400	12.5
4	«В» / вертолетные	4	900*300*300	9.8
5	«ВП» / вертолетные плавающие	4	900*400*400	14.9

#### 2. Технические характеристики

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС работоспособны во всех климатических и географических зонах без ограничений (в т.ч. и в условиях морского климата)

Температурный диапазон применения, С	от -30 до +40
Поверхность пластикового полотна, мм	2500x870
Вес эвакуируемого до, кг	160

**3. Комплектность (указать в последней колонке «+»-нужное или «-»-ненужное для данной модификации)**

№	Наименование	Кол-во	(указать нужное)
1	Пластиковое полотно носилок	1	+
2	Нижний бандаж для крепления «Паука»	4	
3	Паук	1	
4	Карабин для соединения половинок «Паука»	1	
5	Поплавки (Плавающие цилиндры)	2	
6	Ножной груз	1	
7	Чехол транспортировочный	1	+
8	Паспорт	1	+

**4. Указание мер безопасности.**

Перед использованием носилок прочтите Руководство по эксплуатации.

**5.Эксплуатация и техническое обслуживание.**

Многофункциональные спасательные носилки САМОСПАС эксплуатируются в соответствии с руководством по эксплуатации и не требуют специального обслуживания.

**6. Условия транспортировки и хранения**

- 6.1 Разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от механических воздействий, осадков и воздействия агрессивных сред.
- 6.2 Хранить изделие следует в чистом, сухом виде.
- 6.3 Очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой
- 6.4 Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при сушке и хранении.
- 6.5 Дезинфекцию носилок производят после очистки с помощью щетки, смоченной в 1-3 процентном растворе хлорамина.
- 6.6 Запрещается хранить изделие совместно с агрессивными химическими веществами.

**7. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации Многофункциональных спасательных носилок САМОСПАС составляет 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Срок хранения составляет 5 лет со дня продажи. С рекламацией покупатель должен обращаться в торговую организацию или непосредственно к изготовителю по адресу: 125363 Москва, Походный проезд, д 14-303. Претензии принимаются при наличии Паспорта изделия с отметкой о дате продажи.

МП \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Отметка ОТК \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «САМОСПАС» | (495) 640-38-38 | www.samospas.ru

**Помните, что несоблюдение правил хранения и эксплуатации потенциально опасно для жизни пострадавшего!**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Правила эксплуатации при хранении.
  - 1.1 Оберегайте носилки от воздействия прямых солнечных лучей при хранении.
  - 1.2 Храните носилки сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов.
  - 1.3 Оберегайте ленты и швы носилок от повреждений, не храните носилки вне транспортировочных чехлов.
  - 1.4 Перед применением носилок проведите осмотр ремней на предмет отсутствия повреждений.
  - 1.5 Очистку носилок от грязи производят мыльной водой и ветошью с последующей тщательной просушкой.
2. Порядок применения.
  - 2.1 Расстегнуть транспортировочный чехол и извлечь носилки.
  - 2.2 Развернуть носилки и привести их в рабочее состояние.
  - 2.3 Установить носилки на горизонтальную поверхность, при этом концы фиксирующих ремней должны быть откинuty в стороны.
  - 2.4 Уложить пострадавшего на носилки и пристегнуть его фиксирующими ремнями застегивая пряжки в замки. Регулируя петлями сформировать необходимый изгиб упора для ног и защиты головы.
  - 2.5 Взявшись за ручки носилок, поднять и приступить к транспортировке. При переноске пострадавшего необходимо оберегать от толчков и ударов, способных ухудшить его физическое состояние.
  - 2.6 После завершения переноски, опустить носилки на горизонтальную поверхность и освободить фиксирующие ремни. Извлечь пострадавшего из носилок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать носилки:

- без предварительного осмотра,
- с видимыми дефектами, или с обнаруженными трещинами на пластиковом полотне,
- с разломаченными стропами ремней и неисправными пряжками,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять носилки с эвакуируемым без присмотра,
- транспортировать эвакуируемого без надёжной фиксации в носилках,
- использовать носилки не по назначению,
- самостоятельно оснащать «Пауком» и(или) поплавками модификации с литерой «Г» или «К».

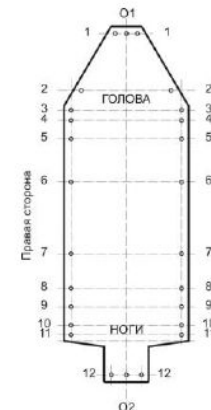


Рис. 1

Назначение люверсов на полотне носилок

№	Назначение люверсов на полотне носилок
01	Для транспортировки волоком головой вперед (совместно с 1 левым и 1 правым)
1	(попарно левый и правый) Формирование изгиба для защиты головы
2	(левый и правый) Первый стяжной ремень
3	(попарно левый и правый) Первая транспор-тировочная руча
4	(левая или правая, соответственно)
5	(левый и правый) Второй стяжной ремень
6	(левый и правый) Третий стяжной ремень
7	(попарно левый и правый) Вторая транспор-тировочная руча
8	(левая или правая, соответственно)
9	(левый и правый) Четвертый стяжной ремень
10	(попарно левый и правый) Формирование изгиба упора ног
11	
12	
02	Для транспортировки волоком ногами вперед (совместно с 11 левым и 11 правым)